
NÁVOD NA POUŽITIE
Pomocná štvornohá palica na schody Kód výrobku: DuoStep

1. Vlastnosti

Pomocná palica na schody je vyrobená z odolného hliníka s práškovým náterom. Má výškovo nastaviteľné nožičky a penové rukoväte. Konštrukcia palice umožňuje jej použitie buď ako oporu pri chôdzi po schodoch, alebo pri vstávaní z postele.

Súprava obsahuje: horný rám s rukoväťami, spodný rám, nožičky s koncovkami (2 ks).

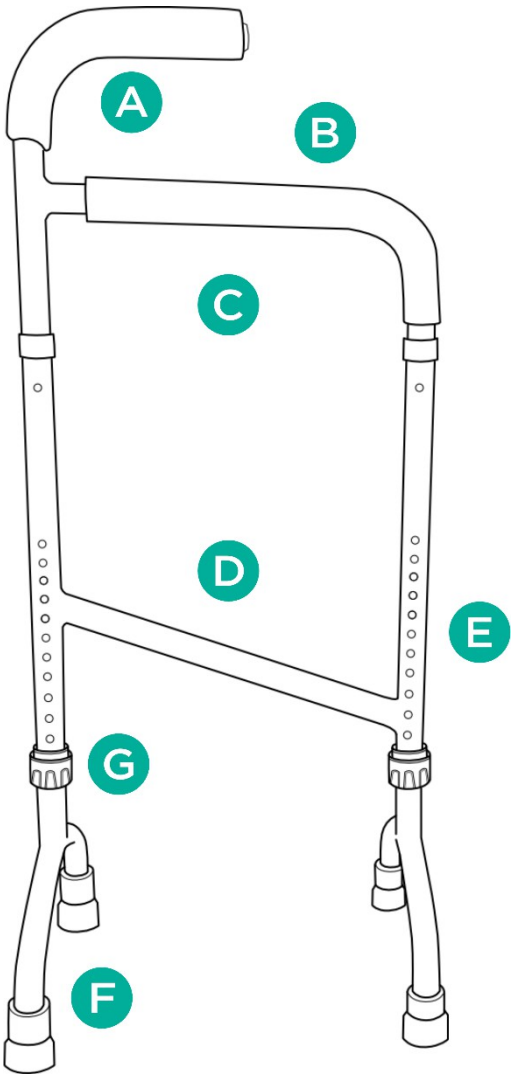

Súčasti palice:

- **A.** Rukoväť
- **B.** Oporná rukoväť
- **C.** Horný rám
- **D.** Spodný rám
- **E.** Nastavenie výšky
- **F.** Nohy s protišmykovými koncovkami
- **G.** Aretačné zariadenie

2. Použitie

Pomocná palica na schody je určená na poskytovanie opory pri chôdzi po schodoch alebo pri vstávaní z postele, čím minimalizuje riziko pošmyknutia a pádu. Palica sa odporúča pre osoby so zníženou pohyblivosťou, ktorá im bráni v samostatnom vykonávaní bežných denných činností. Výrobok je určený na použitie ako pri starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, tak aj doma.

3. Montáž

Krok 1. Spojte horný rám (C) so spodným rámom (D) pomocou poistných čapov.
Krok 2. Vložte nožičky (F) do otvorov na spodnom ráme (D). Zvoľte požadovanú výšku, zaistite ju čapmi a utiahnite poistku nastavenia (G).

NASTAVENIE VÝŠKY NOHÍ

- Na nastavenie nôh stlačte poistné kolíky umiestnené na nohách a zvoľte vhodnú výšku.

- Ak sa palica používa na schodoch, vyberte výšku podľa výšky schodov (jedna z nôh by mala byť umiestnená o jeden schod vyššie ako druhá).
- Ak sa palica používa ako opora pri vstávaní z postele, nastavte nohy tak, aby boli obe v rovnakej výške.

4. Technické údaje

Nastavenie celkovej výšky	87–113 cm
Výška oporného držadla od zemou*	69–95 cm
Celková šírka	30,2 cm
Celková hĺbka	27,6 cm
Hmotnosť	1,32 kg
Max. nosnosť	136 kg

**merané pri rovnakej výške oboch nôh*

5. Poznámky

Spoločnosť Timago International Group nenesie zodpovednosť za nesprávne používanie výrobku, nedodržanie bezpečnostných predpisov a nesprávne používanie.

6. Údržba

Rám pravidelne čistite vlhkou handričkou bez použitia čistiacich prostriedkov. Dôkladne osušte. Odolné škvrny môžete odstrániť špongiou.

7. Podmienky skladovania a prepravy

Výrobok by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, vode ani vlhkosti.


8. Informácie o záruke

Na všetky výrobky distribuované našou spoločnosťou sa vzťahuje záruka, ktorej podmienky sú uvedené v záručnom liste dostupnom na našej webovej stránke. Obraťte sa, prosím, na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Nezabudnite, že na účely uplatnenia záruky je potrebné uchovať doklad o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru).

9. Nežiaduce udalosti súvisiace so zdravotníckymi prostriedkami

Každá závažná udalosť týkajúca sa zdravotníckeho zariadenia musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

10. Štítky

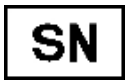	Referenčné číslo		Výrobca
	Číslo šarže		Kód UDI
	Sériové číslo		Zdravotnícky prostriedok
	Poznámka		Prečítajte si prosím návod
	Tento výrobok spĺňa zákonné požiadavky Európskej únie na zdravotnícke pomôcky (MDR 2017/745).		

Náš kompletný sortiment produktov je k dispozícii u našich distribútorov. Viac informácií nájdete na:
www.timago.com. Ďakujeme, že ste si vybrali Timago!